

Producto Libre de Látex y
Ftalatos

ASPIRADOR

AMEU[®]



Aspirador Ameu es una Marca registrada de Dolphin Medical





Dolphin Medical

www.dolphinmedical.com

¿QUÉ ES **AMEU**?

La aspiración manual endouterina es un procedimiento médico simple, eficaz y seguro para la evacuación uterina en el tratamiento de un **aborto incompleto y para la biopsia endometrial**.

El ASPIRADOR AMEU es un catéter especialmente desarrollado para el método de aspiración manual endouterina (**AMEU**) y biopsia de endometrio. Una vez ensamblado con las **CÁNULAS FLEXIBLES AMEU** permite el vacío manual de la cavidad endouterina

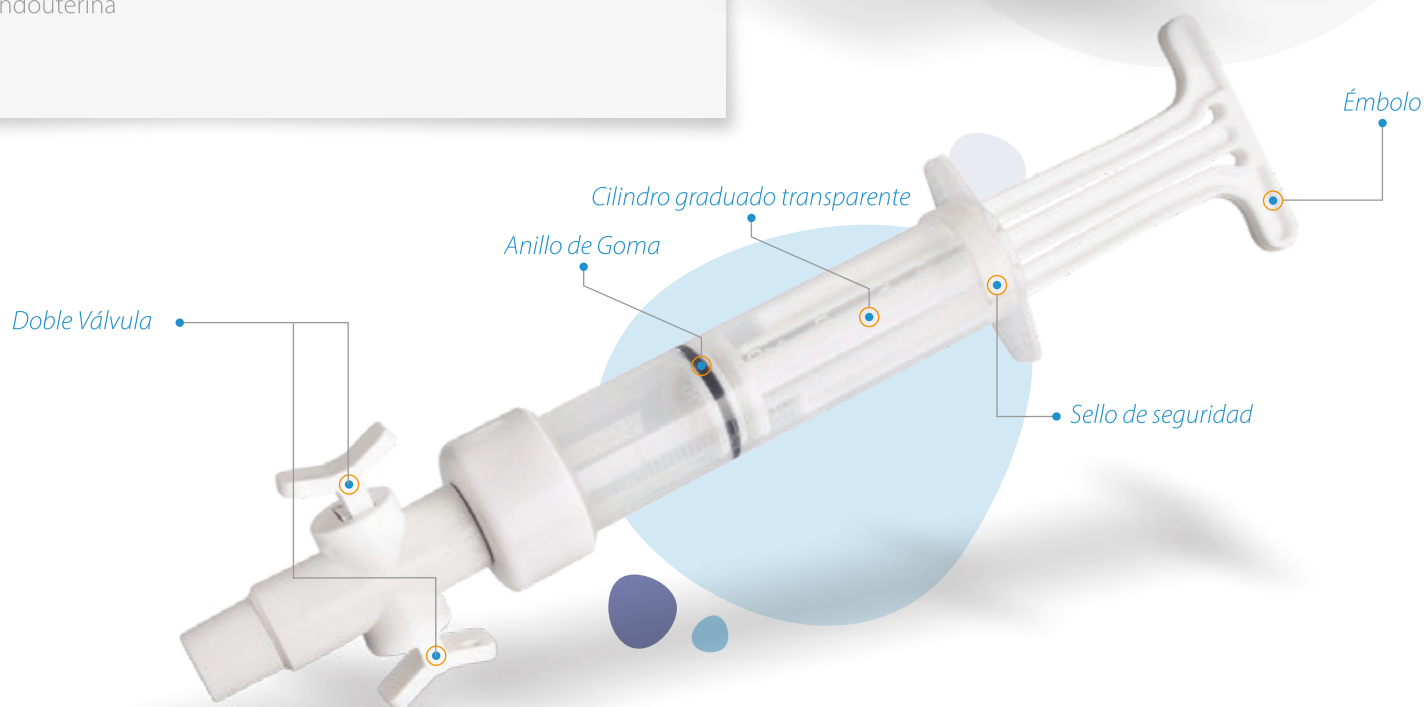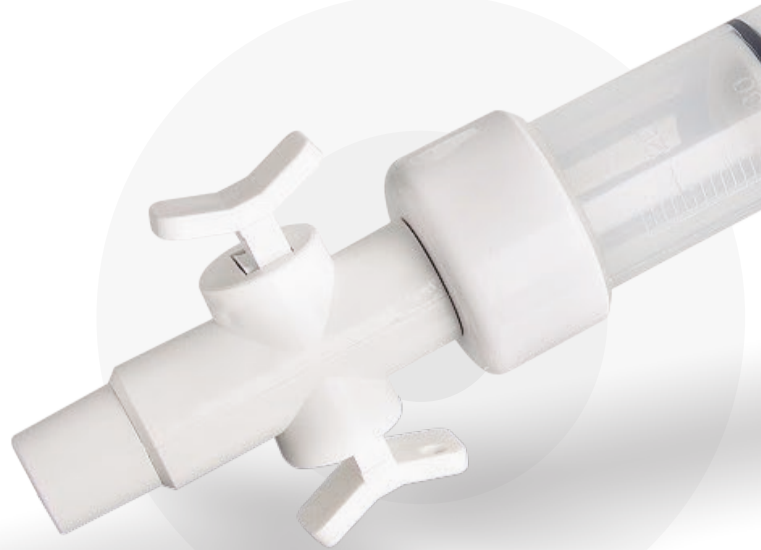

¿CÓMO FUNCIONA?

Funciona mediante un sencillo mecanismo de aspiración, el cual tiene alta potencia debido al diseño del conjunto cuerpo-pistón, 60cc, mediante cánulas flexibles o semirrígidas de diferentes diámetros (de 4mm a 12mm).

INDICACIÓN DE USO

Está indicado para la evacuación uterina, aspiración uterina en obstetricia y procedimientos ginecológicos.


USOS

- Legrado por succión.
- Succionar la cavidad uterina.
- Obtención de biopsias de endometrio.
- Tratamiento de hemorragias uterinas anormales.
- Tratamiento del aborto incompleto.
- Tratamiento del aborto espontáneo.
- Tratamiento de un aborto con medicamentos fallido.
- Tratamiento de un aborto espontáneo perdido.
- Interrupción de un embarazo molar.
- Tratamiento de la endometritis crónica.

CARACTERÍSTICAS

- Presentado en embalaje individual de papel de grado quirúrgico.
- Volumen: 60 ml
- Vacío: 609.6-660.4mm / Hg
- **Libre de látex y ftalatos**
- Individualmente envasados y esterilizados en OE
- Se adapta perfectamente a los catéter flexibles de 4 hasta 12mm.

Estudios científicos demuestran la superioridad sobre el curetaje instrumental, con menores riesgos de perforación y lesiones, además de disminuir el empleo de medicamentos, reduciendo también la permanencia hospitalaria.

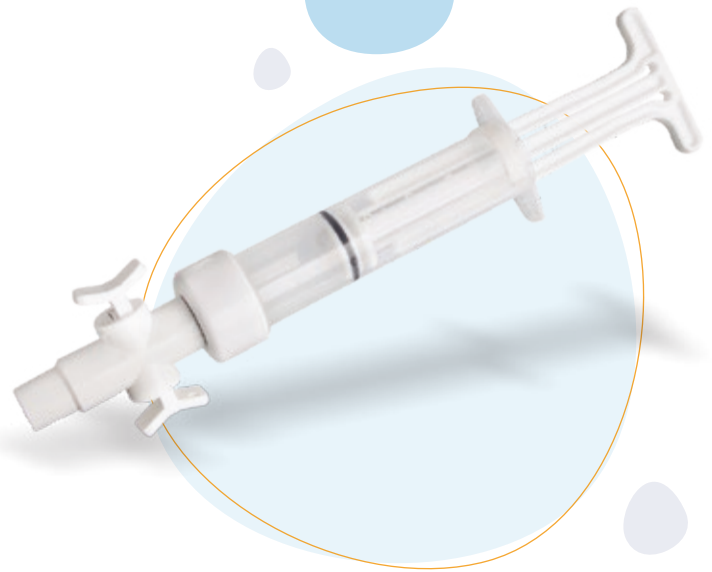

Código	Descripción Producto	Presentación
208 04	Cánula Flexible 4mm	Unitario
208 05	Cánula Flexible 5mm	Unitario
208 06	Cánula Flexible 6mm	Unitario
208 07	Cánula Flexible 7mm	Unitario
208 08	Cánula Flexible 8mm	Unitario
208 09	Cánula Flexible 9mm	Unitario
208 10	Cánula Flexible 10mm	Unitario
208 12	Cánula Flexible 12mm	Unitario
209 05	Aspirador Ameu	Unitario
209 02	Kit Aspirador Ameu (Aspirador + 8 cánulas)	Unitario



Producto libre de
Látex de caucho natural



Producto libre de Ftalatos



CÁNULAS

- La longitud total es de 22 cm.
- Superficie lisa del catéter.
- Punta redondeada.
- Empaquetado individualmente en envase bilaminado de fácil apertura.
- Opciones de diámetro de 4-12 mm.
- Códigos de colores coincidentes para el adaptador para facilitar el emparejamiento (cuando sea necesario).



ACCESORIOS

- Tubo de silicona o lubricante para anillo de goma
- Anillo de goma
- Sello de seguridad







Dolphin Medical

BOLIVIA

Av. Piraí Esq. Arumá
Edificio Sta. Mónica 2da. Planta
Of. 12 Sta. Cruz de la Sierra.

(59 1) 7213 3393

ventasdmb@dolphinmedical.com

CHILE

Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

(56 2) 2952 0165

ventas@dolphinmedical.com

COLOMBIA

Calle 12 No 2-35 (PH-A)
Cota - Cundinamarca

(57) 31 7893 8018
(57) 31 7403 6110

ventasdmc@dolphinmedical.com

PERÚ

Jr. Diana M.Z.A D2 lote. 25 INT. 2
URB Santa María de surco (piso2)
Santiago de surco, Lima

(51) 9 3480 1987

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com